

Flexite Supreme su Overdenture

La protesi mobile totale su impianti (overdenture) è una protesi che si avvale di impianti osteointegrabili per la sua stabilizzazione

Odontotecnico Sig. Mariano Bilardo

Odontoiatra Dott. Manlio D'Andrea




Lavoro preparatorio in bocca




Presca impronta con copyng in teflon




Analoghi da laboratorio inseriti

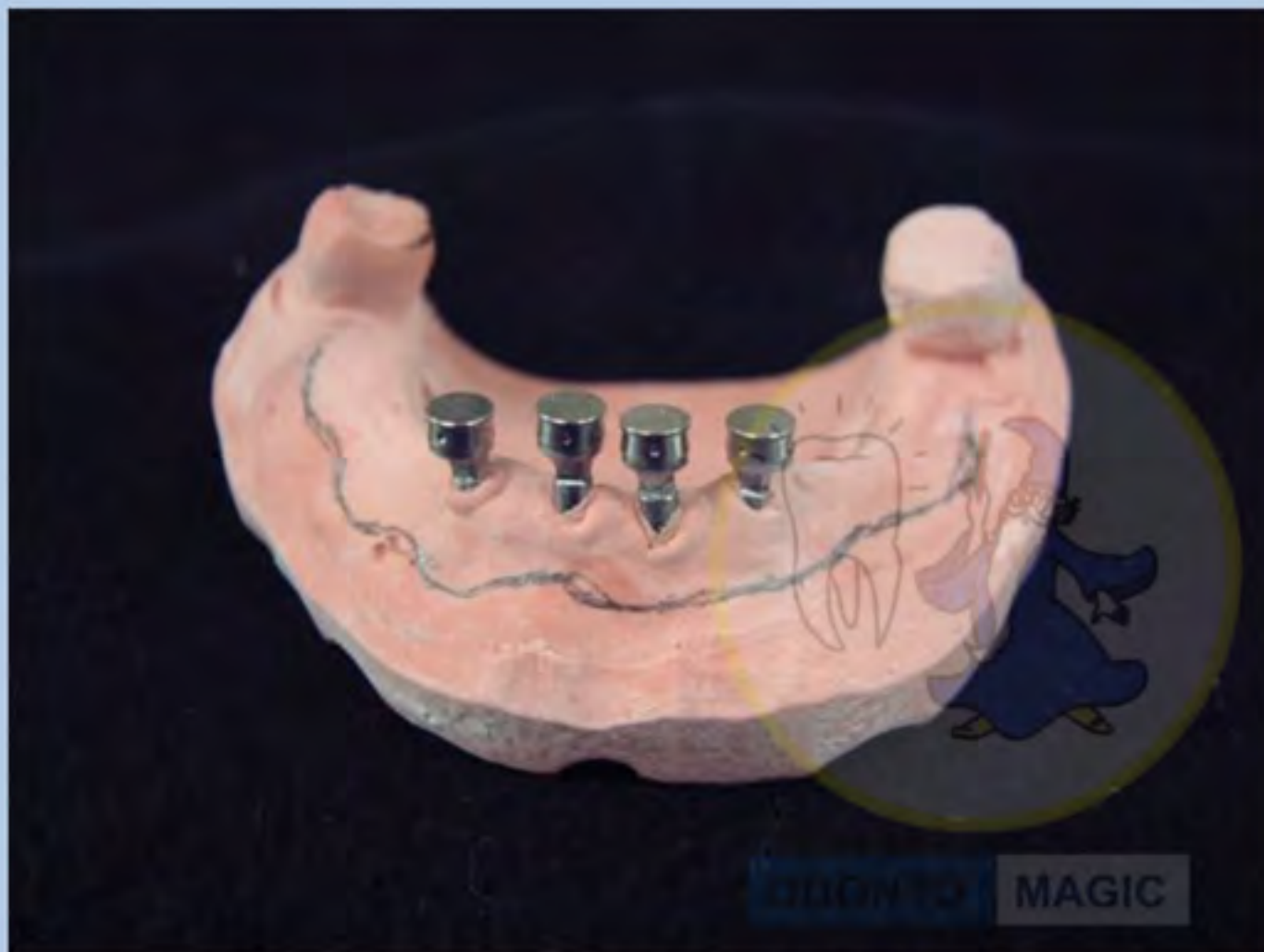

Modello in gesso con analoghi, cappette in teflon inserite nel box inox e fissaggio con cera collante

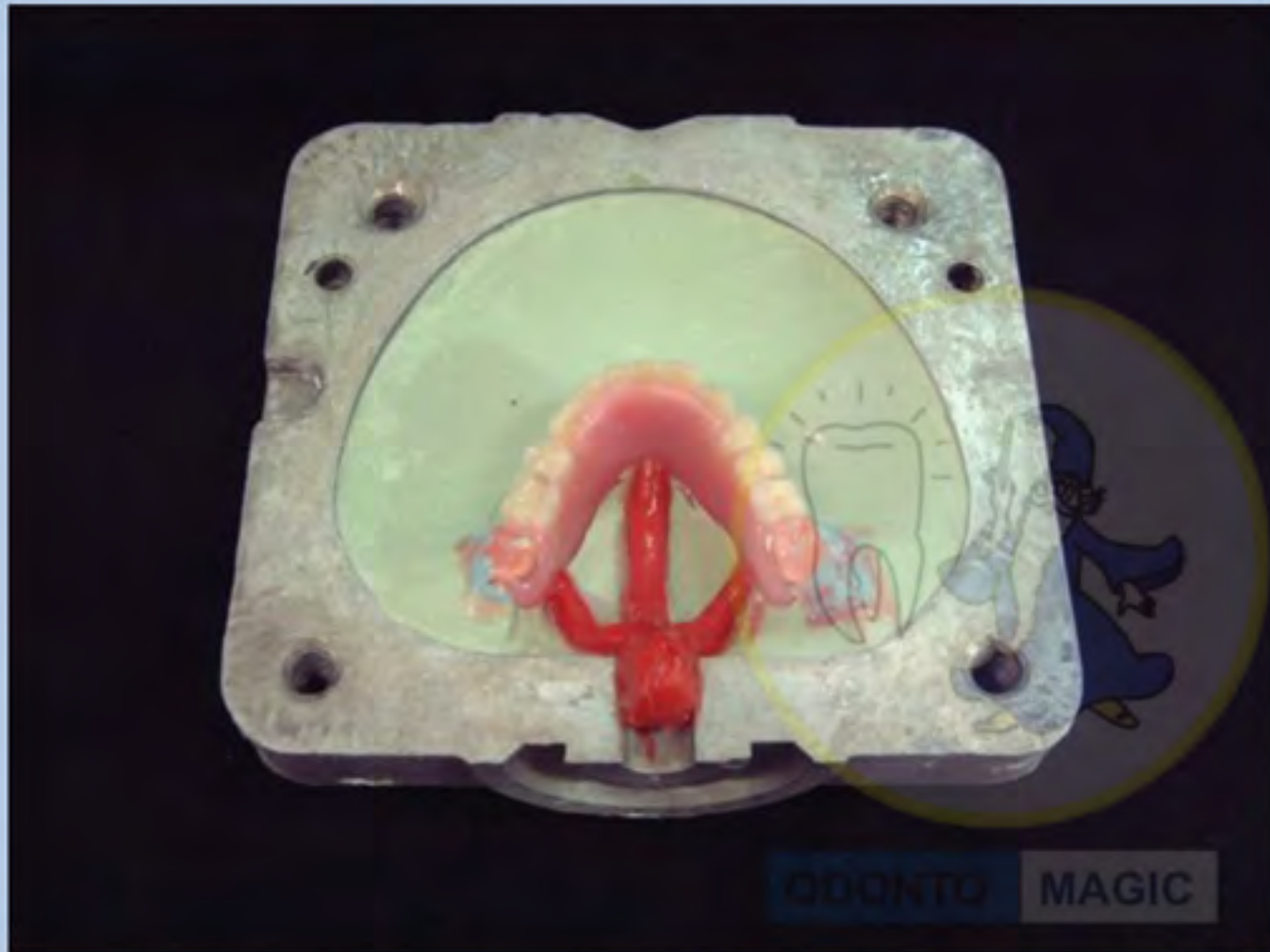


Montaggio protesi e messa in muffola

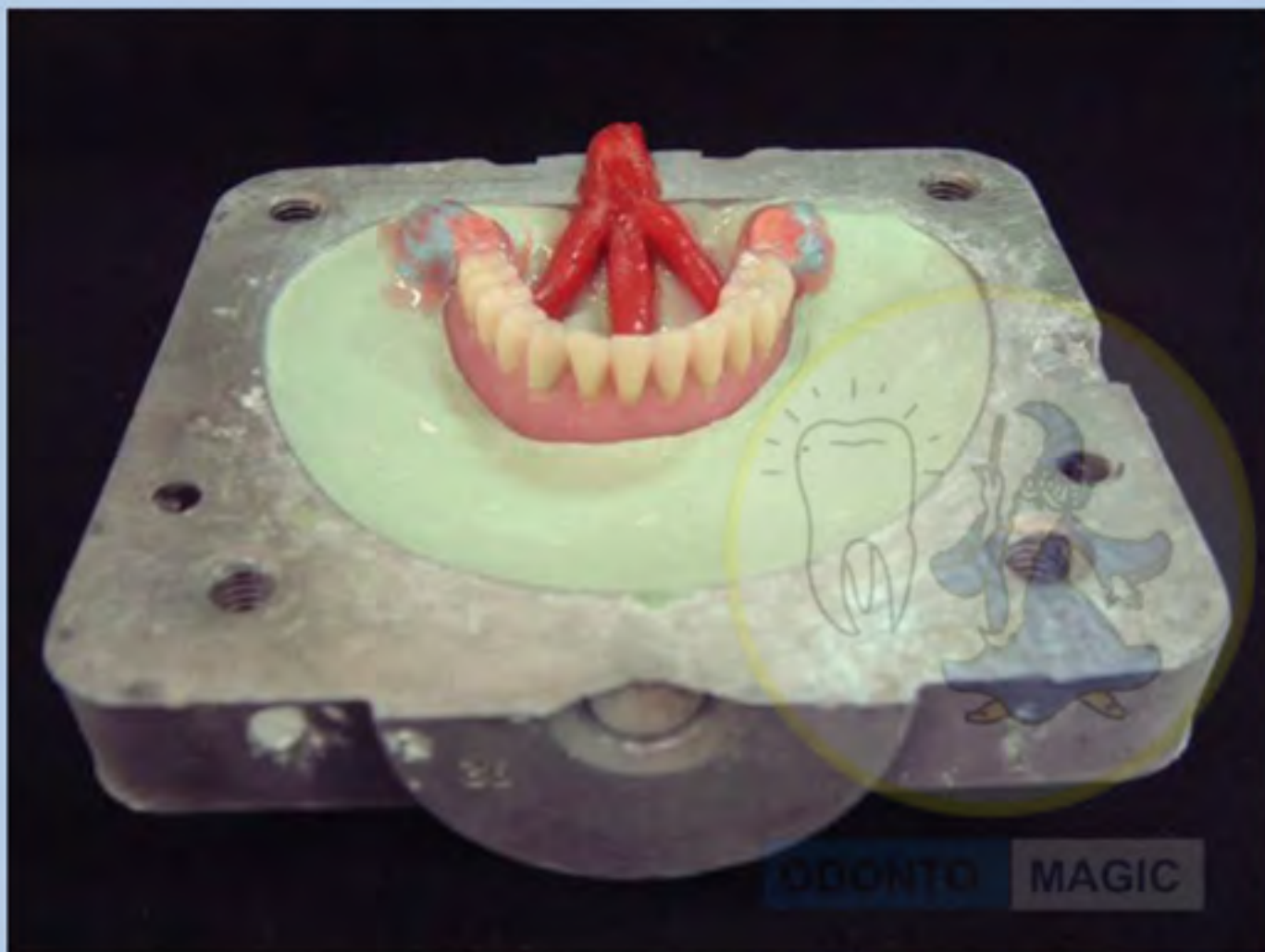


Montaggio protesi e messa in muffola



Da notare la protezione con cemento per evitare adesioni del nylon e spostamenti delle cappette

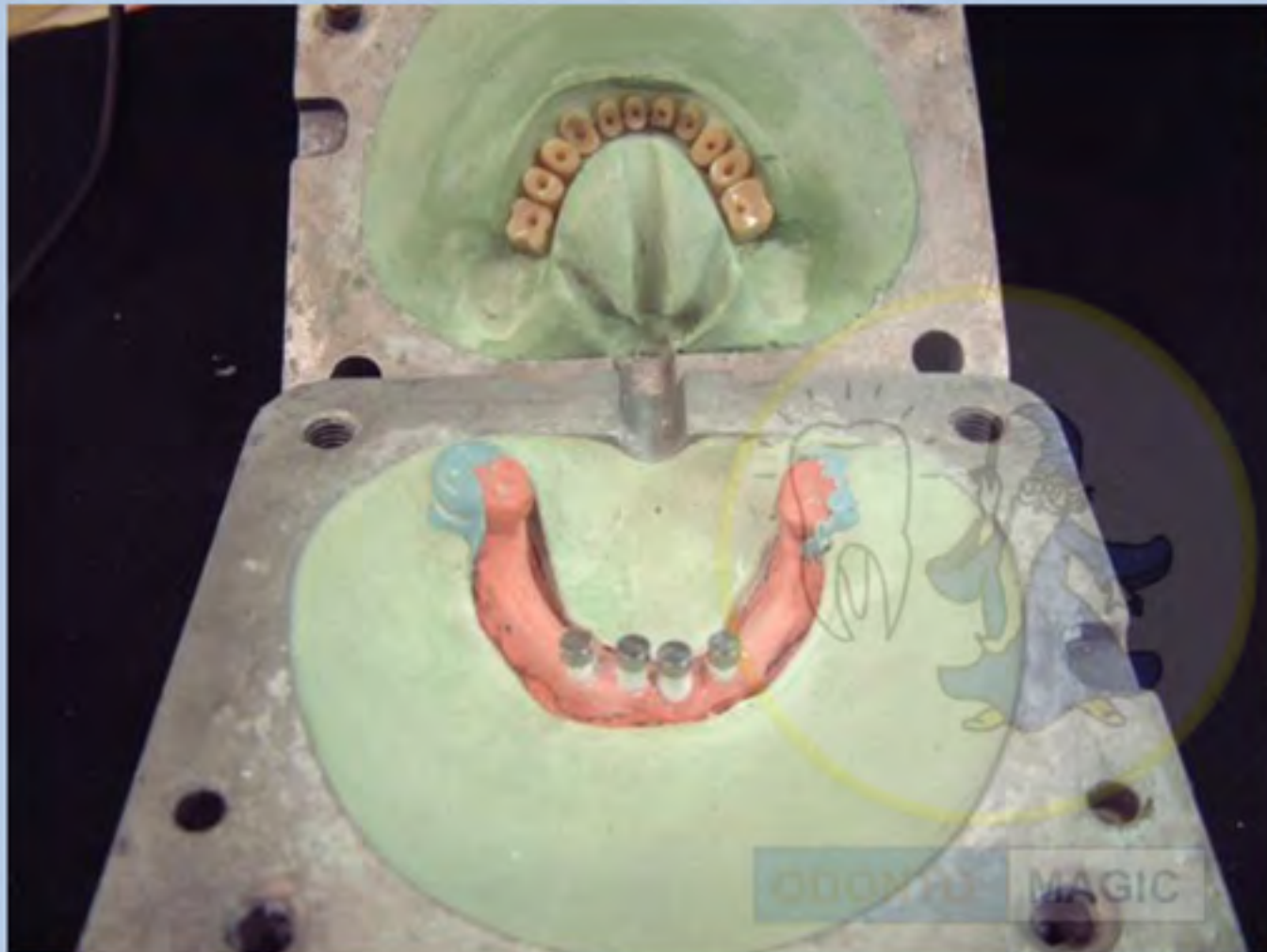

Muffola pronta per l'iniezione

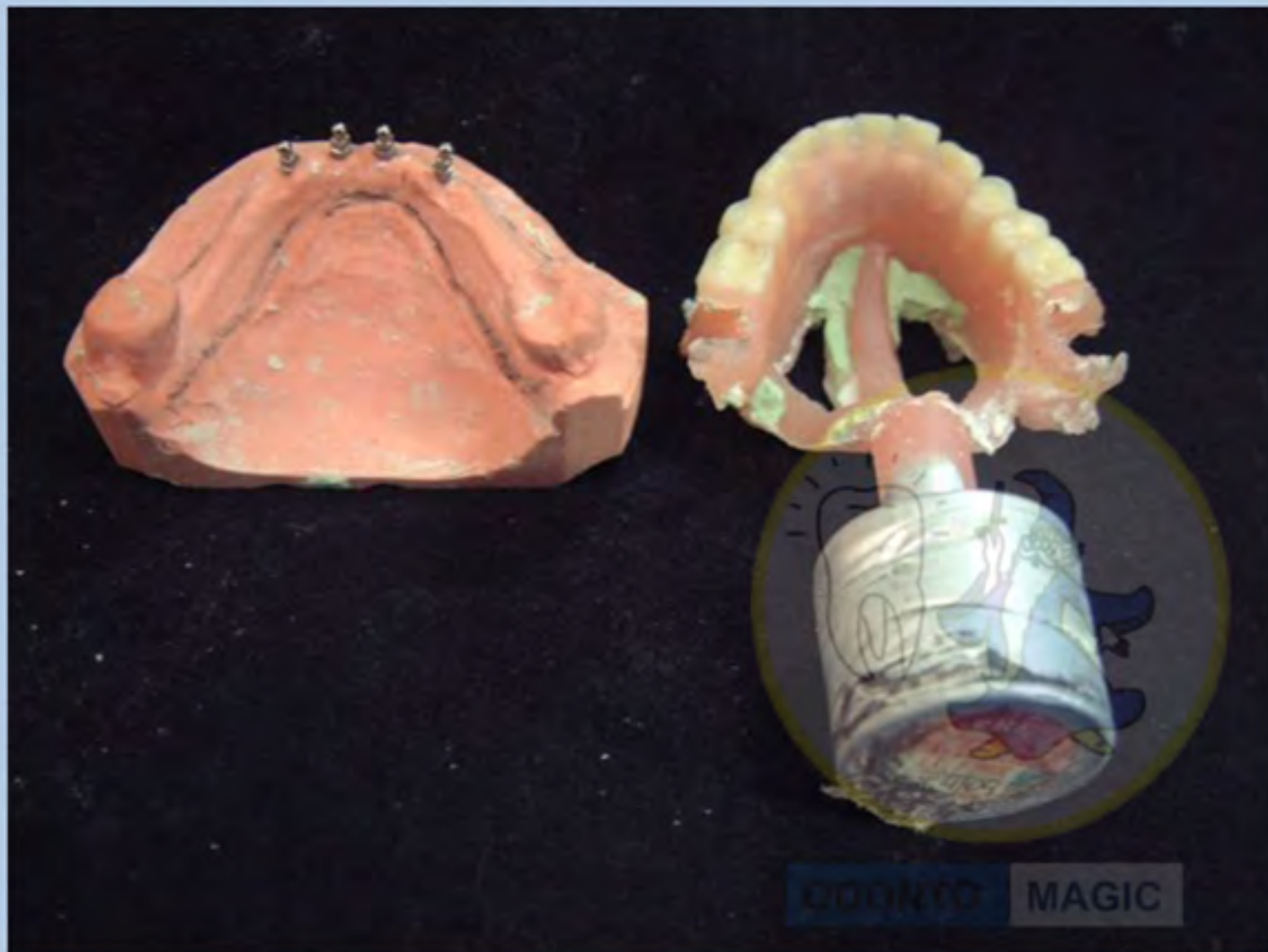

Iniezione effettuata con Flexite Supreme



Da notare i box inox perfettamente inglobati nella
Flexite Supreme



Lavoro pulito

Da notare contorni box inox e cappette in teflon inserite
e sempre sostituibili



Protesi ultimata



Protesi ultimata su modello



Protesi in bocca



Protesi in bocca

Protesi dimostrativa
in FLEXITE
supreme natural...

...Praticamente INVISIBILE


Protesi iniettata




Protesi finita su modello



Protesi finita su modello

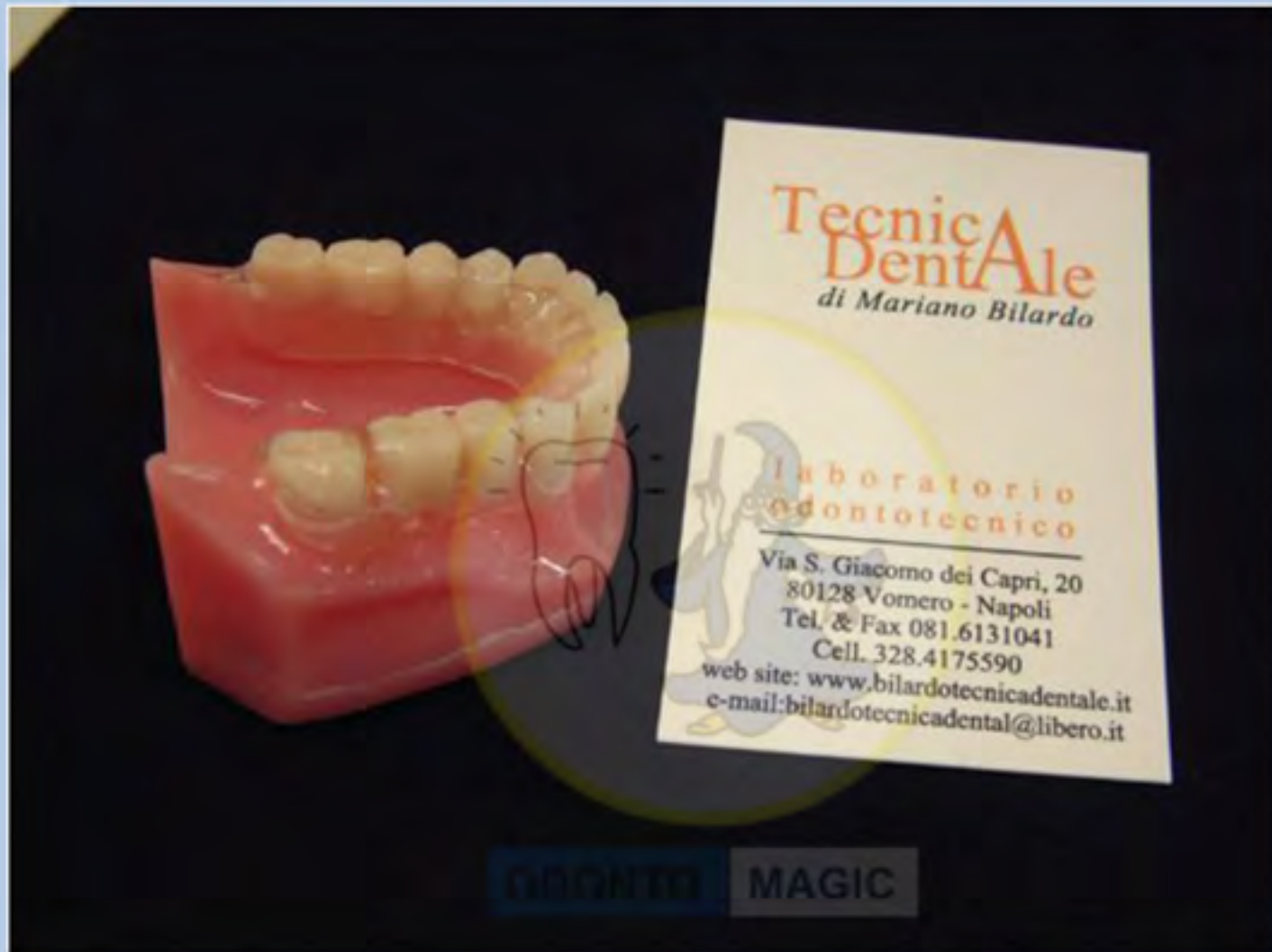

Protesi finita su modello

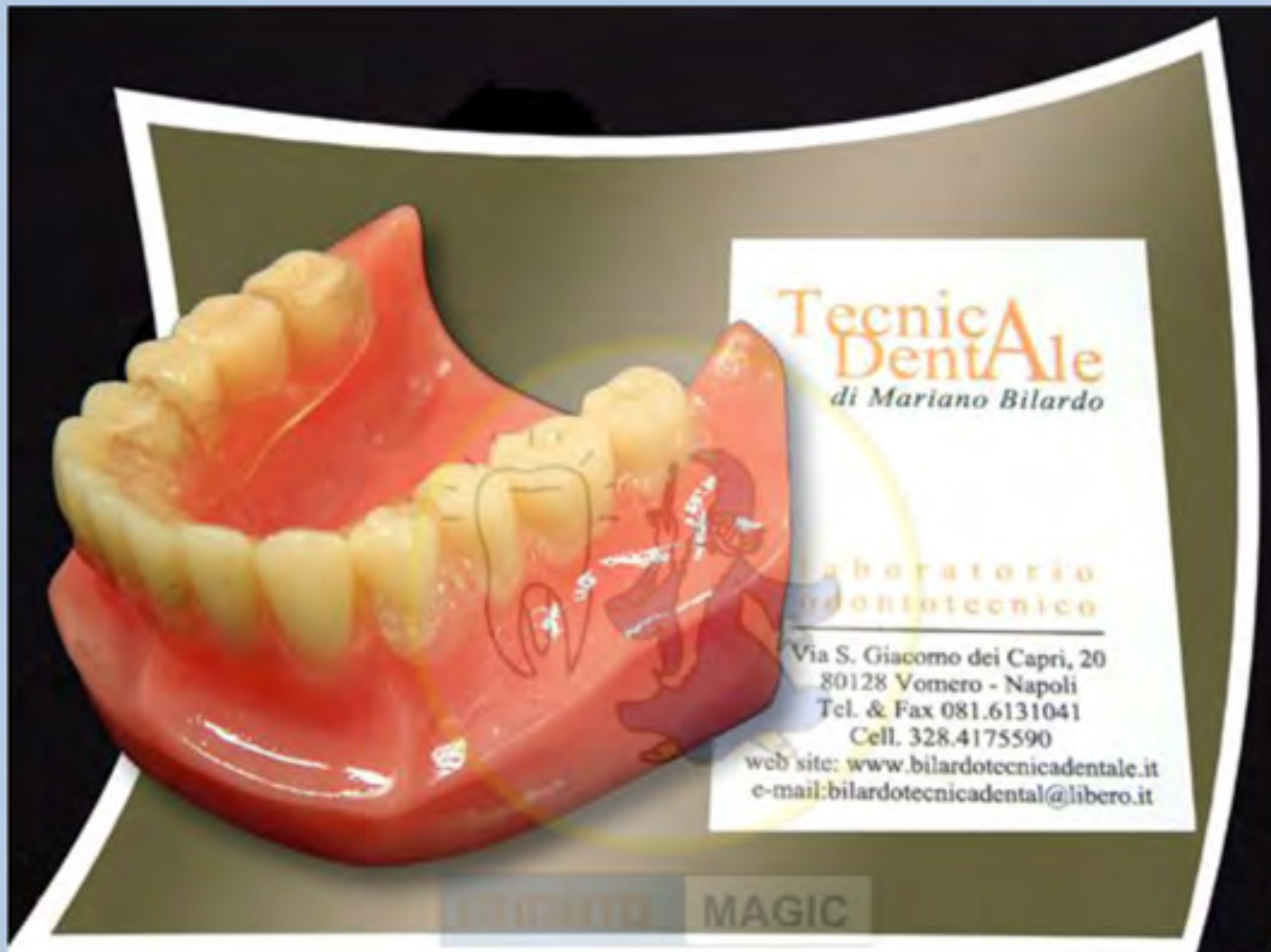

Protesi su barra in Flexite MP
Lucitone Pink realizzata al posto di
vecchia protesi in resina su barra e
controbarra.

Paziente terza classe scheletrica


Odontotecnico: Sig. Mariano Bilardo

Vecchio lavoro in resina acrilica su barra e controbarra



La nuova protesi in Flexite pesa 12 grammi contro i 35 grammi di quella in resina


Barra in situ

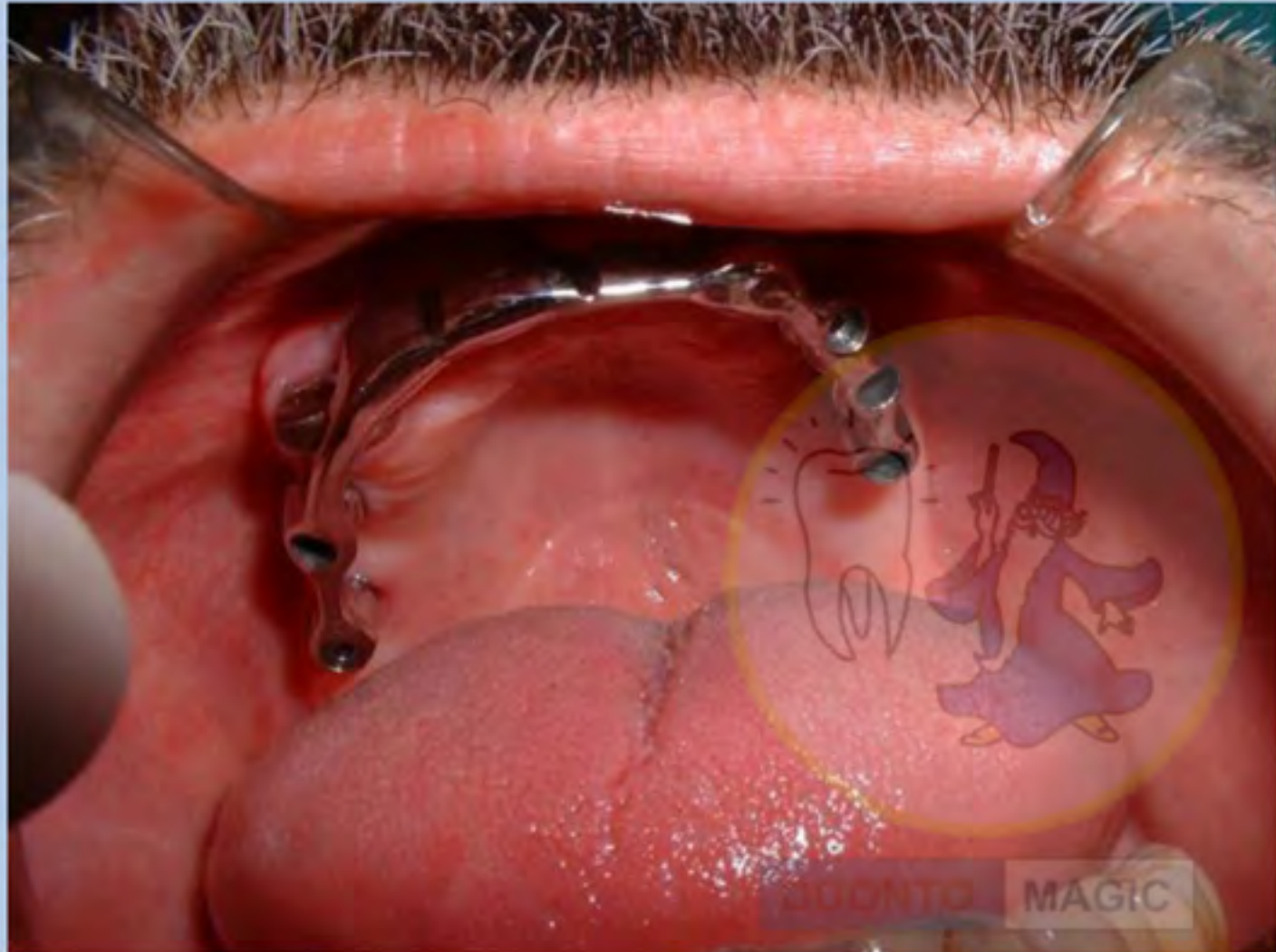

Protesi iniettata



Protesi da lucidare

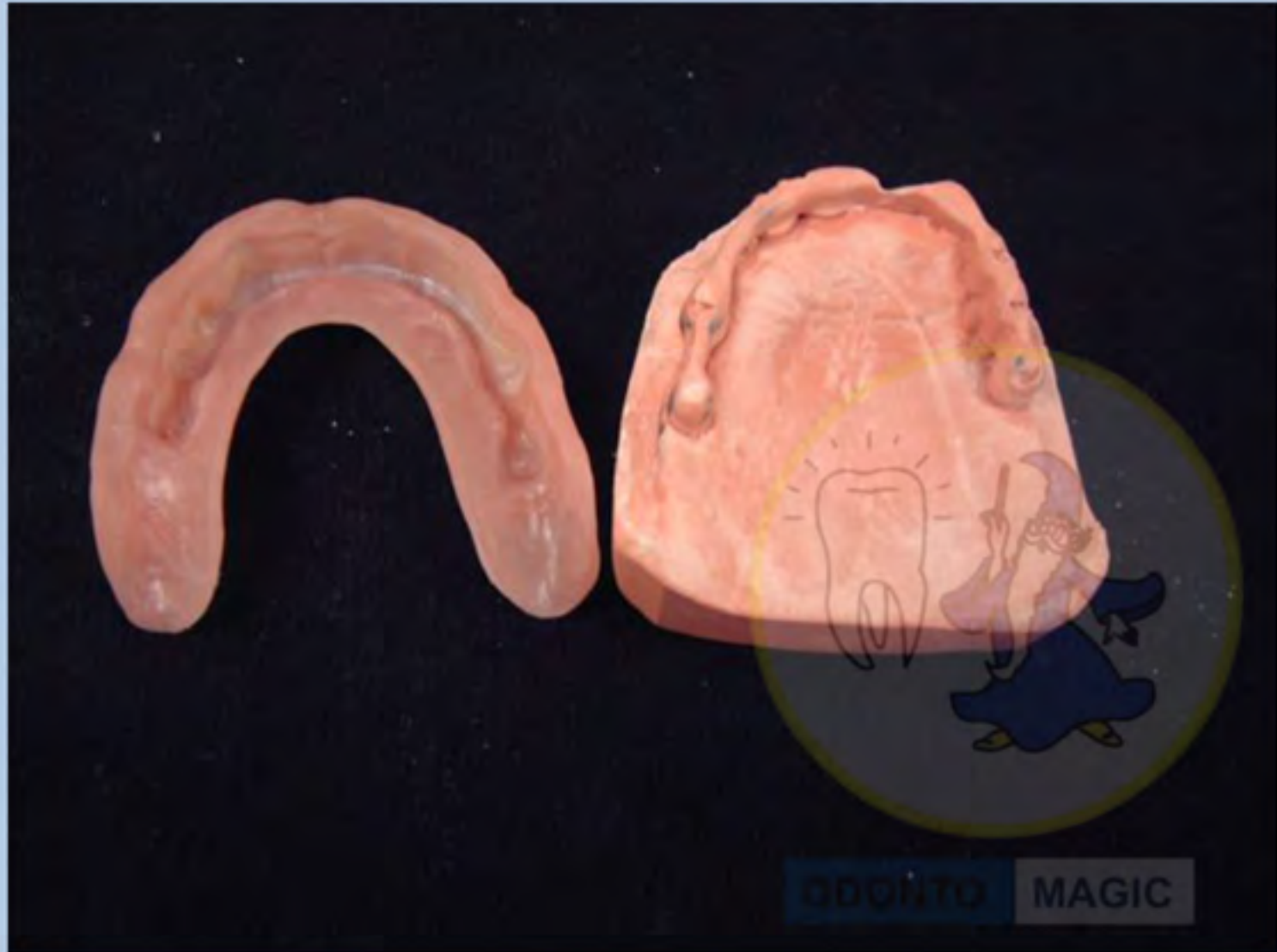

Protesi lucidata



Protesi finita



Protesi su modello



Protesi su modello



ODONTO MAGIC

Protesi posizionata



Scheletrato in Flexite Plus Light Pink



ODONTO

MAGIC





ODONTO

MAGIC

Scheletrato in Flexite Supreme Dark Pink



ODONTO MAGIC



ODONTO MAGIC

Totale in Flexite MP Lucitone Pink
notare la traslucenza che permette di
trasmettere le caratteristiche della
mucosa gengivale





TOOTH MAGIC



Ganci in FLEXITE
Supreme natural
iniiettati direttamente
su scheletrato

Modellazione in cera e preparazione per iniettata



Iniettata effettuata

Si dice che il sorriso è lo specchio dell'anima...

NON SMETTERE MAI DI SORRIDERE

FLEXITE
Ti dimentichi di portare una protesi dentale

Tecnica DentAle di Bilardo Mariano
LABORATORIO ODONTOTECNICO

Via S. Giacomo dei Capri, 20
80128 Villarosa - Napoli
Tel. & Fax 081.6131041
C.N. 828.4175100



DENTO MAGIC

The advertisement features a smiling woman in the upper right corner. Below her is a dental mold with a yellow wax bite registration. In the foreground, there is a dental appliance, possibly a partial denture, with a metal clasp and a white resin base. The background is a light blue gradient.

ganci flexite supreme natural
iniiettati su scheletrato



ganci flexite supreme natural
iniettati su scheletrato



Lavoro finito su modello

Si dice che il sorriso è lo specchio dell'anima...

NON SMETTERE MAI DI SORRIDERE



FLEXITE
Ti dimentichi di portare una protesi...



Tecnica DentAle di Bilardo Mariano
LABORATORIO ODONTOTECNICO

Via S. Giacomo dei Capri, 20
80128 Vomero - Napoli

Tel. & Fax 081.6131041
Cell. 328.4175590



ODONTO MAGIC

Epitesi
in FLEXITE Supreme
colore Dk pink

Odontecnico: Mariano Bilardo

Epitesi in FLEXITE Supreme



Epitesi in FLEXITE Supreme



Epitesi in FLEXITE Supreme



Flexite Supreme colore Light Pink





Flexite Guard idonea per protettori
sportivi e byte morbidi



GUARD

FLEXITE

NATURAL

E26A

CE

ODDITY MAGIC

Vari impieghi dei ganci estetici
CLASP-EZE Flexite

Flexite Supreme con ganci clasp-eze trasparenti



Ganci CLASP-EZE

Si dice che il sorriso è lo specchio dell'anima...

NON SMETTERE MAI DI SORRIDERE

FLEXITE
Ti aiuterà di portare una protesi dentaria

CLASP-EZE
*PRE-FORMED
READY MADE CLASPS!*

MADE WITH FLEXITE SUPREME
HIGH MOLECULAR PLASTIC
EASY TO USE - TIME SAVER

*Clasps can be adapted easily with
special heat gun or needle point flame.*

PINK CLEAR TOOTH COLOR

62

CLASP-EZE
MAGIC

The advertisement features a woman in a black turtleneck smiling broadly. To her left is a pink bottle of 'CLASP SET' resin. In the foreground, a white pre-formed dental clasp is shown, along with a heat gun. The background is dark with a large, faint 'CLASP-EZE' logo.

Ganci CLASP-EZE isolati fissati a scheletrato con rapid set



Ganci CLASP-EZE isolati fissati a scheletrato con rapid set



Ganci CLASP-EZE su scheletrato



Ganci CLASP-EZE su scheletrato




Ganci CLASP-EZE su scheletrato



Gancio CLASP-EZE trasparente inglobato in resina acrilica



Gancio CLASP-EZE trasparente inglobato in resina acrilica

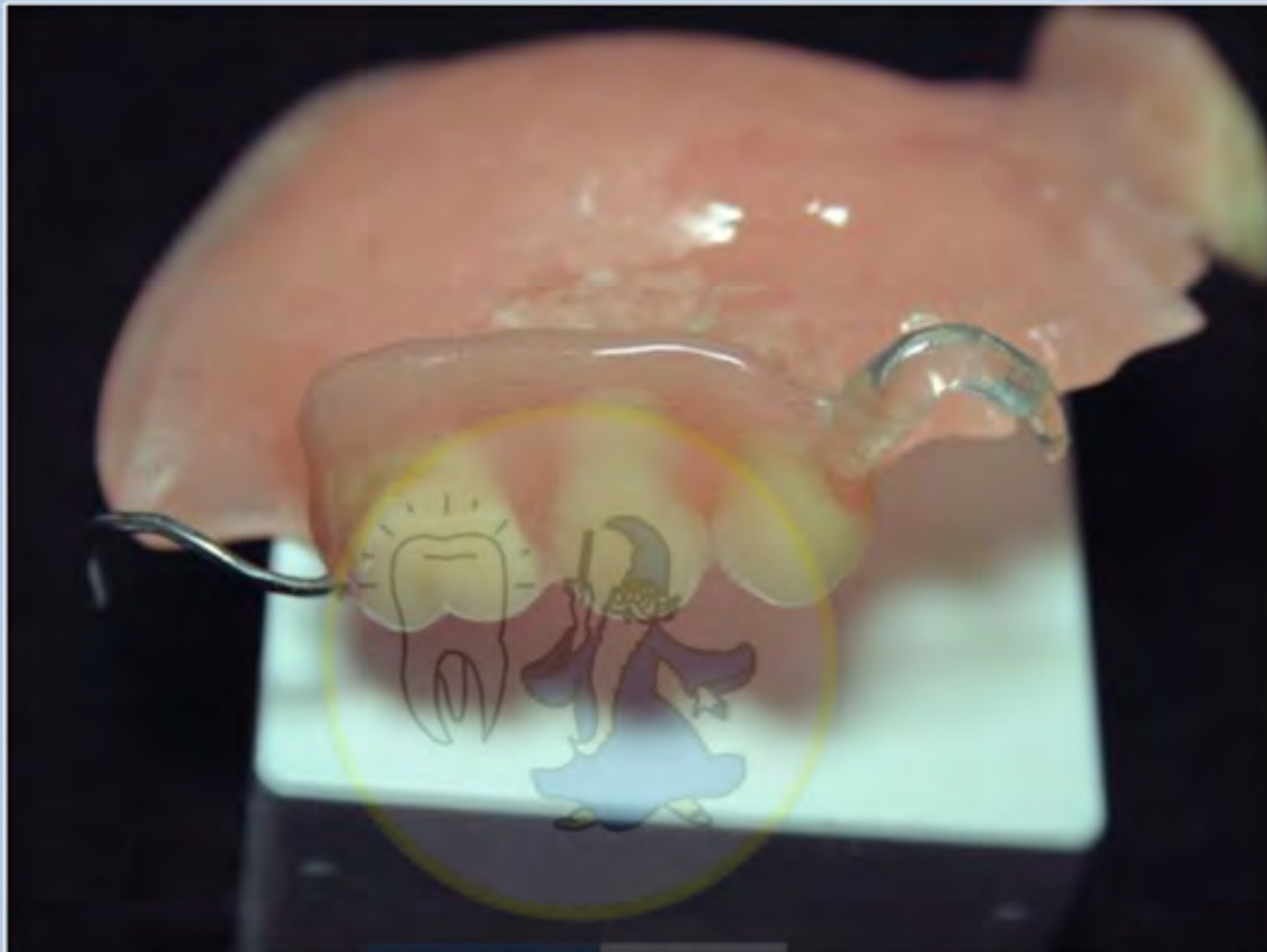

Gancio CLEAR CLASP-EZE inglobato in resina acrilica



Protesi Flexite Plus su scheletrato
estetico rinforzato



ODONTO MAGIC


Flexite
vs
Scheletrato





Elementi singoli
in FLEXITE
Supreme Natural

Preparazione per iniettata

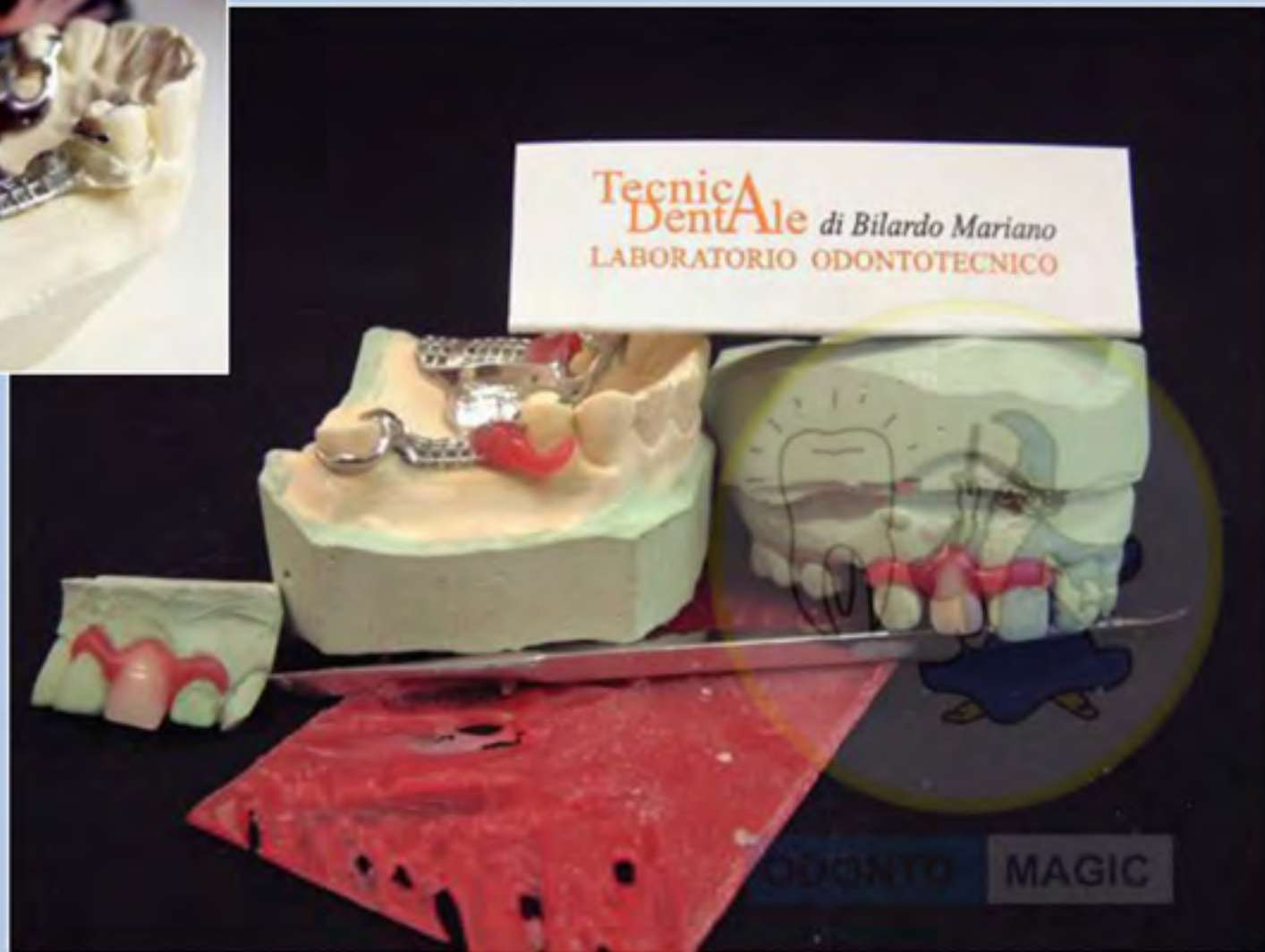

Iniettata effettuata



Lavoro finito



Prima...



... dopo



Parziale in Flexite Supreme su
zirconia/ceramica con fresaggi. Notare la
perfetta aderenza della
Flexite con gli alloggi fresati



1/2

Odontotecnico: Mariano Bilardo

Parziale in Flexite Supreme su zirconia/ceramica con fresaggi. Notare la perfetta aderenza della Flexite con gli alloggi fresati



2/2

Odontotecnico: Mariano Bilardo